

定期点検

⚠ 注意事項（定期点検について）

- 本製品を長期間使用していなかった場合は、再度使用前に、正常かつ安全に動作するか点検してください。

● 定期点検・部品交換時期の目安

- 目安時期：3年目（※消耗品は除く）

【定期点検のお知らせ機能について】

本製品には、ラヴィールマット Ge を安心して永くご使用いただくために「定期点検・部品交換時期の目安をお知らせする機能」が搭載されています。

ご使用の累積時間が下記の規定時間に達した場合は、タイマー表示部に「E1」「E2」「E3」のお知らせ表示が出て、各種ボタン操作が一時的にご使用できない状況となります。

※お知らせ表示の解除を行う際は、下記の注意事項を必ずご確認くださいのうえ、「定期点検のお知らせ表示 解除方法」をご確認ください。

ご相談・ご不明な点がございましたら「メンバーズサポートセンター」にお問い合わせください。

⚠ 注意事項（必ずご確認ください。）

本製品を永くご愛用いただき、誠にありがとうございます。

ご使用者の安全を守るため、【お知らせ表示の解除】を行う前に、必ず下記の内容をご確認ください。

以下の項目に1つでも当てはまる、または気になる点がございましたら、速やかに「メンバーズサポートセンター」へお問い合わせください。

✓ チェック

☐ 電源が入らない

☐ 各機能・動作・出力に異常を感じる

☐ 本体各部に破損・劣化がある

☐ 異音・異臭・発熱がある など

⚠ 注意事項（『E3 表示』に関するご注意）

E3 表示（累積使用 30,000 時間）は、本製品の長期使用に伴う経年劣化が想定されるため、安全性の観点からお客様による解除は行えません。

恐れ入りますが、E3 表示が出た際は、必ず「メンバーズサポートセンター」へご連絡ください。


● 各表示例と累積使用時間

	『 E1 表示 』	『 E2 表示 』	『 E3 表示 』
定期点検表示			
累積使用時間	10,000 時間	20,000 時間	30,000 時間
表示までの目安年数※ (例：1日8時間使用の場合)	約3年半後※	約7年後※	約10年後※
解除方法	別紙参照	別紙参照	お客様による解除不可

※記載の年数は「1日8時間使用」の条件をもとにした目安年数です。実際の表示時期は使用状況により異なります。


定期点検のお知らせ表示 解除方法

ラヴィールマットGe 操作パネル

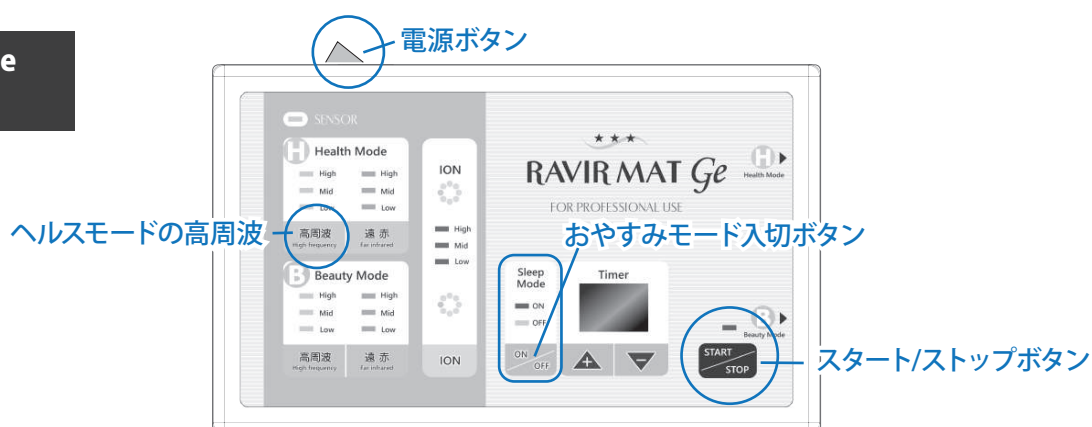


●「E1」解除方法

① 電源をOFF

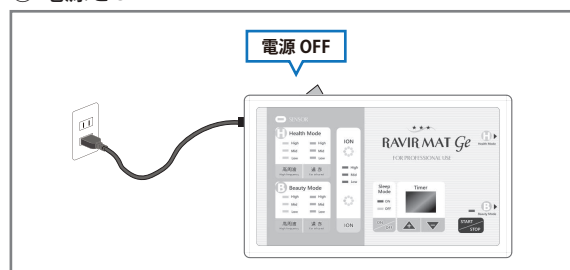

② おやすみモード[入/切]ボタンを押しながら電源ON

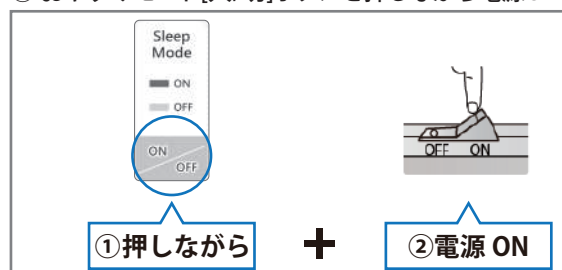


③ タイマー画面が「--」の表示に変わる



④ 「スタート/ストップ」ボタンを1度押す



⑤ タイマー画面がいつもの表示に戻る

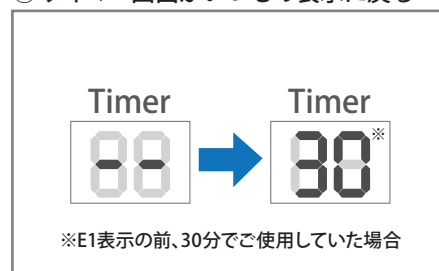


●「E2」解除方法


●「E1」解除方法 ①～③を行う

- ① 電源をOFF
- ② おやすみモード[入/切]ボタンを押しながら電源ON
- ③ タイマー画面が「--」の表示に変わる

④ ヘルスモードの「高周波」+「スタート/ストップ」ボタンを1度押す

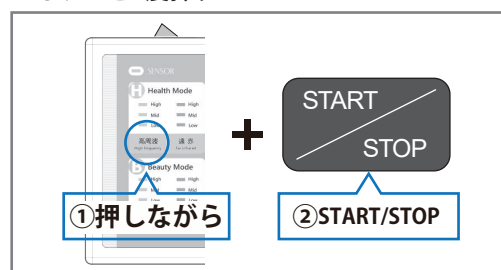

⑤ タイマー画面がいつもの表示に戻る

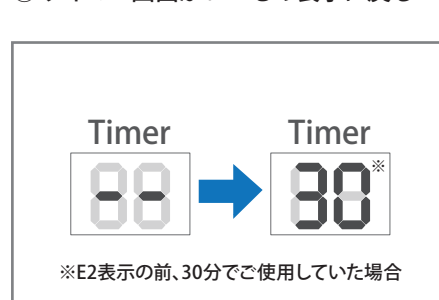

※ 解除ができない場合は、始めからやり直してください。

「E3」の表示が出た場合は、[MSC メンバーズサポートセンター 0120-783-524
ガイダンス① 機器修理・メンテナンス室] までご連絡ください。